	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

Entité émettrice : Radiothérapie/RTH	
Rédacteurs : L.Lann, G.Goasduff, et AS.Lucia	
Domaine d'application - Personnel concerné : Service de radiothérapie	
Approbation par : Pr PRADIER – Chef de service radiothérapie S.LAFFAY -Directeur adjoint qualité-risques	Signé le : 02/03/2022

Ce mode opératoire permet de décrire les modalités du « Contrôle qualité mensuel ».

ACCELERATEUR TRUEBEAM NOVALIS 3

DATE	
Heure début contrôle qualité	
Heure fin contrôle qualité	

Intervenants	
Technicien(s) VARIAN	
Physicien(s) / Technicien	

Remarques :

Check list :

	CQ syst sécurité (signature, compte rendu...)	CQ méca (signature, compte rendu...)	CQ dosimétrique (signature, compte rendu...)	Remplir tableau synthèse CQ
Réalisé				

I) Environnement et sécurité

S'assurer que:	Réalisé	Commentaire
Les indicateurs relatifs à la présence du faisceau au poste de commande et la signalisation lumineuse de l'état du faisceau située au-dessus de la porte fonctionnent.		
Les installations disposant de systèmes anti-collision fonctionnent		
Les dispositifs de commande de l'appareil de traitement et de la table de traitement fonctionnent		
Les systèmes de surveillance visuelle et auditive du patient fonctionnent		
Il est impossible de réaliser une irradiation lorsqu'une porte de la salle de traitement est ouverte		
Le laserGuard fonctionne (<i>se mettre à la hauteur du LaserGuard et vérifier que le voyant s'allume en rouge</i>)		
L'état sous le plateau de la table est propre		
L'arrêt de l'irradiation est possible au pupitre		
Les butées de fin de course jouent leur rôle (bras, collimateur, table)		
La descente d'urgence de la table fonctionne		
Les arrêts d'urgence fonctionnent		
Les accessoires sont en bon état		
Rédémarrer le CBCT Reconstructor (<i>Mode service > Onglet CBCT reconstructor > redémarrer</i>)		
VVS : Impossible de lancer le faisceau si on bipe la mauvaise étiquette		
Vérification du centrage des barres pour les contentions (Vérifier que les vis des barres de contentions soient vissées + vérifier les joints)		

Veille paramètres


	Valeur de référence	Valeur relevée
Température eau	40°	
Pression eau	38 PSI	
Pression SF6	32 PSI	
Niveau eau		

Ajustement : OUI NON

Paramètres des faisceaux

LT HOUR (Filament Timer): HT TOUR (Beam On Timer) :

Visa Physicien	Commentaires	Signature

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

II) Contrôles mécaniques

a) Echelle angulaire collimateur et bras

Le but est de vérifier que l'angle affiché (graduations et recopie) correspond à l'angle réel du bras et du collimateur.

Matériel

Niveau électronique

Méthode

A l'aide du niveau électronique, positionner le bras dans les 4 positions successives (0, 90, 180, 270 degrés), noter l'indication de la recopie numérique sur l'écran de contrôle. Procéder de manière identique pour la rotation du collimateur avec le bras à 90°. Vérifier les butées du bras et du collimateur.

Résultats

Position niveau électronique	recopie collimateur	recopie rotation du bras
0°		
90°		
180°		
270°		
<i>Tolérance AFSSAPS</i>	<i>±1°</i>	<i>±1°</i>
<i>butée</i>		
<i>Ref butée</i>	<i>175° / 185°</i>	<i>185,5° / 174,5°</i>

b) Correspondance axe mécanique (collimateur principal) et axe du faisceau lumineux

Le collimateur tourne autour d'un axe de symétrie qui est matérialisé par le croisillon et la simulation lumineuse. On mesure le diamètre du cercle décrit par l'axe mécanique du collimateur et par l'axe géométrique sur une rotation du collimateur de 360°.
On doit vérifier la superposition de l'axe mécanique du collimateur et l'axe géométrique.

Matériel

Applicateur 15x15 – Plaque plexiglas (utilisé pour les caches électrons) – Scotch

Méthode

- Insérer l'applicateur 15x15 et glisser la plaque de plexiglas dans l'insert. Matérialiser le croisillon sur un bout de scotch. Faire tourner le collimateur.
- Le test à DSP 120 est réalisé avec Aquilab

Résultats :

	DSP = 100 cm		<i>Tolérance AFSSAPS</i>
	L1	L2	
Diamètre de l'axe mécanique			<i><2mm</i>
Diamètre de la projection lumineuse			<i><2mm</i>
Ecart entre les deux axes			<i>≤1mm</i>

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

c) Télémètre

Le télémètre indique la distance de la source à la surface.

Matériel

Piges métalliques VARIAN

Méthode

- Collimateur et bras à 0°, se positionner à **la position 0 inscrite sur la table**. (Lng : 140 ; Lat : 0)
- Positionner le porte-pige sur la tête de l'accélérateur. Positionner la pige en fonction de la distance de contrôle.
- Monter la table jusqu'à ce que le plateau soit au contact de la pige et jusqu'à la graduation voulue.
- Vérifier que l'indication du télémètre correspond bien à la distance mesurée. Regarder également la valeur de la « verticale » de la table sur l'écran.
- Se positionner au milieu du trait de la tige.

Résultats

Lecture Télémètre	80		100		110	
Distance Réelle						
Ecart (mm)						
<i>Tolérance AFSSAPS</i>	<i>Ecart < 1,5mm ne doit pas dépasser 2 fois celui mesuré au CQ initial</i>					
Verticale de table (cm)		20		0		-10
Ecart (mm)						
<i>Tolérance constructeur</i>	<i>Ecart < 2 mm</i>					

d) Isocentre


L'isocentre correspond au centre de rotation de la source. L'axe mécanique du collimateur et l'axe géométrique étant confondus, on utilise la simulation lumineuse pour vérifier l'isocentre.

Méthode

- Bras à 0° et collimateur à 0°. Pointe en bout de table
- Positionner la pointe pour que son extrémité se projette au centre du croisillon.
- Tourner le bras de l'appareil à 90° et ajuster la hauteur de la pointe afin que son extrémité se projette au centre du croisillon. Cette position ainsi définie nous détermine un point sur le plan transverse et sur le plan longitudinal.
- Pour les positions du bras à **180°** et **270°**, indiquer sur ces deux plans, les écarts entre la projection de la pointe et la projection du croisillon.

Résultats :

	90°	180°	270°	<i>Tolérance AFSSAPS</i>
écart maximal Droite-Gauche				<i><2mm</i>
écart maximal Tête-Pied				
écart maximal Haut-Bas	REF			

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

e) Lasers

Les lasers matérialisent l'isocentre machine. Il faut vérifier que l'intersection des lasers se superpose à l'isocentre.

Matériel

Papier + pointe fine

Méthode

- L'isocentre de la machine vient d'être vérifié avec la pointe fine donc, sans bouger le montage, les lasers latéraux et sagittal peuvent être vérifiés à l'isocentre (Bras à 0°, collimateur à 0°).
- Les lasers latéraux doivent coïncider horizontalement (H) et verticalement (V) dans un plan vertical contenant l'isocentre jusqu'à des plans parallèles situés à 20cm de part et d'autre.
- Le laser sagittal doit coïncider avec la projection de l'axe lumineux jusqu'à +/- 20cm par rapport à l'isocentre dans le plan horizontal contenant l'isocentre
- Bras à 0° et collimateur à 0°, centrer un papier millimétré sur la projection du croisillon à DSP=100cm et vérifier la coïncidence du laser à 20cm vers la tête et vers les pieds, recommencer à DSP=80cm et DSP=120cm.

Résultats

Lasers latéraux

Ecart	Isocentre	+20cm (tête)	-20cm (pied)	+20cm (Gauche)	-20cm (Droite)
Laser Droit	H :	H :	H :	H :	H :
	V :			V :	V :
Laser Gauche	H :	H :	H :	H :	H :
	V :			V :	V :
Tolérance AFSSAPS		±2mm			

Laser sagittal

Ecart	Isocentre	+20cm (tête)	-20cm (pied)
Plan de l'isocentre : DSP=100cm			
Plan supérieur : DSP=80cm			
Plan inférieur : DSP=120cm			
Tolérance AFSSAPS	±2mm		

f) Affichage champs lumineux

Le champ lumineux matérialise le faisceau d'irradiation qui est défini principalement par la position des mâchoires. La position des mâchoires est définie afin d'avoir la taille de champ indiqué à DSP=100cm.

Matériel

Papier millimétré

Plaque de plexi verticale (semestriel)

Méthode

- Collimateur à 0°

MENSUEL : Bras à 0°

SEMESTRIEL :

- Bras à 90° : Février / Aout
- Bras à 180° : Mars / Septembre
- Bras à 270° : Avril / Octobre

Centrer le papier millimétré ou plaque de plexi sur la projection du croisillon à DSP100

Réaliser les tailles de champ (mâchoires seules) en s'aidant de l'affichage numérique.

Mesurer les distances séparant la projection du centre du croisillon des bords du champ lumineux.

Relever les distances Xtête, Xpied, Ydroite et Ygauche.

	MODE OPERATOIRE				Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3				Date : 21/04/2022
					Version : 02

Vérifier qu'en ouverture et fermeture les résultats sont identiques.

Faire le 2 tests avec les 2 ampoules du champ lumineux.

PHOTONS


Bras à 0°		DIMENSION DU CHAMP LUMINEUX Mâchoires seules				écart max (mm)	Tolérances AFSSAPS
Affichage du champ (cm²)		Ypied (cm)	Ytête (cm)	Xdroite (cm)	Xgauche (cm)		
5 x 5	L1						≤ 2mm
	L2						
10 x 10	L1						≤ 2mm
	L2						
20 x 20	L1						≤ 2mm
	L2						
Angle du bras :°		CONTROLE SEMESTRIEL					
20 x 20	L1						≤ 2mm
	L2						

ELECTRONS

MENSUEL : Bras à 0° 3 Tailles d'applicateurs

SEMESTRIEL : Mai / Novembre : Bras à 90° et 270° Applicateur 10x10

Bras à 0°		DIMENSION DU CHAMP LUMINEUX Mâchoires seules				écart max (mm)	Tolérances AFSSAPS
Affichage du champ (cm²)		Ypied (cm)	Ytête (cm)	Xdroite (cm)	Xgauche (cm)		
6 x 6	L1						≤ 2mm
	L2						
10 x 10	L1						≤ 2mm
	L2						
20 x 20	L1						≤ 2mm
	L2						
10x10		CONTROLE SEMESTRIEL MAI / NOVEMBRE					
Bras à 270°	L1						≤ 2mm
	L2						
Bras à 90°	L1						≤ 2mm
	L2						

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

g) Ouverture des mâchoires en mode électrons

Mettre en place l'applicateur d'électrons. Puis au pupitre programmer un faisceau avec chaque énergie. Appuyer sur « Prepare » et Vérifier que les mâchoires s'ouvrent correctement. Appuyer sur « Preview » avant de changer d'énergie.

Mois contrôle	Applicateur	6 MeV	9 MeV	12 MeV	15 MeV
Janv / Juill / Nov	6x6 cm ²	20x20	20x20	11x11	11x11
Fév / Aout / Déc	10x10 cm ²	22x22	20x20	15x15	15x15
Mars / Mai / Sept	15x15 cm ²	22x22	20x20	19x19	19x19
Avril / Juin / Octobre	20x20 cm ²	27x27	25x25	25x25	23x23

Remarque : aucune recommandation AFSSAPS

h) Symétrie et orthogonalité

Mâchoires

Les mâchoires sont définies comme étant orthogonales et symétriques pour un faisceau symétrique.

Matériel

Papier millimétré ou plaque de plexiglas verticale

Méthode

Centrer le papier ou la plaque de plexiglas sur la projection du croisillon à DSP 100 bras à 0°, 270°, 180°, 90° (collimateur 0°) un **champ 40x40**

Vérifier la symétrie et l'orthogonalité des mâchoires aux 4 angulations de bras.

0° : Janvier/Juillet


90° : Février / Aout

180° : Mars / Septembre

270° : Avril / Octobre

Résultats :

DSP100 40x40cm²	Symétrie Distance Axe-Bord Champ				Orthogonalité Angle mâchoires adjacentes			
	X1 (Droite)	X2 (Gauche)	Y2 (Tête)	Y1 (Pied)	X1-Y2 D/T	Y2-X2 T/G	X2-Y1 G/P	Y1-X1 P/D
Bras à°								
<i>Tolérance AFSSAPS</i>	<i>< 1mm</i>				<i>< 1°</i>			

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

Applicateurs électrons

Matériel

Plaque de plexiglas avec taille de champ

Méthode

Centrer le plaque de plexiglas sur la projection du croisillon à DSP 100 bras à 0°, 270° et 90° (collimateur 0°) Vérifier la symétrie et l'orthogonalité des mâchoires aux trois angulations de bras pour les différentes tailles d'applicateurs suivant :

- applicateur : 6×6 et cache Varian 6×6 : Janvier / Juillet
- applicateur : 10×10 et cache Varian 10×10 : Février / Aout
- applicateur : 15×15 et cache Varian 15×15 : Mars / Septembre
- applicateur : 20×20 et cache Varian 20×20 : Avril / Octobre

Résultats :

Appli :	Symétrie Distance Axe-Bord Champ				Orthogonalité Angle mâchoires adjacentes			
	X1 (Droite)	X2 (Gauche)	Y2 (Tête)	Y1 (Pied)	X1-Y2 Droite- Tête	Y2-X2 Tête- Gauche	X2-Y1 Gauche- Pied	Y1-X1 Pied- Droite
Bras à 0°								
Bras à 90°								
Bras à 270°								
Tolérance AFSSAPS	< 1mm				< 1°			

i) Contrôle du MLC et contrôles de synchronisation des paramètres variables

Vérification sur le R&V ARIA avant de faire le contrôle :

Chaque mois, il faut changer le numéro des lames à contrôler pour les 6 images suivantes :

OrthoMLCB0C0 OrthoMLCB90C0 OrthoMLCB270C0
OrthoMLCB0C90 OrthoMLCB90C90 OrthoMLCB270C90

Mois	Numéros des lames		Position lames (cm)	
	Lame 1	Lame 2	Banc X1	Banc X2
Janvier	47	14	-1	1
Février	49	12	-1	1
Mars	51	10	-1	1
Avril	53	8	-1	1
Mai	50	11	-1	1
Juin	52	9	-1	1
Juillet	46	15	-1	1
Août	43	18	-1	1
Septembre	40	21	-1	1
Octobre	37	24	-1	1
Novembre	34	27	-4	4
Décembre	32	29	-4	4

Matériel

- Plaque de billes
- Fantôme Aquilab
- Logiciel « Artiscan »


Méthode

La procédure est décrite dans le **MOP 03756**.

Résultats

Exploiter par Aquilab, ARTiscan

Visa Physicien	Commentaires	Signature

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

III) Contrôles dosimétriques

a) Coïncidence champ lumineux/champ irradié

Matériel

1 film gafchromique - Plaques RW3

Méthode

Positionner le film à DSP=100cm, **250UM**

Sur le même film pointer avec un marqueur les bords du champ en repérant la tête et droite patient pour les tailles de champs suivantes

Résultats

Energie		Ecart mesuré entre champ lumineux et champ irradié (mm)				Tolérance AFSSAPS
		Gauche	Droite	Tête	Pied	
Photons 6MV	10×10cm ²					≤2mm
Photons 18 MV	10×10cm ²					
Electrons 12 MeV	10 x 10cm ²					

b) Stabilité de l'énergie

Matériel

Matrice PTW 2D-Array

Plaques RW3 _ Fantôme BQ Check

Application: PTW – Multicheck

Photons

Méthode

Bras et collimateur à 0°

4cm de PMMA en dessous de la 2DArray **DSP = 100 cm**

Champ d'irradiation : 20 x 20 cm²

Centrer la 2D Array


Poser le fantôme BQ Check sur la matrice en respectant le sens Target/Gun inscrit sur le fantôme.

Mesure sur 100 UM.

Pour détecter BQ Check : Tools > Measurement Option > BQ CHECK > Always used.
PENSER A ENLEVER CETTE OPTION

Résultats

Dose	X 6	X 18
Iréf=J20/J10 (2D Array)	0.668	0.780
Imesuré=J20/J10		
Ecart (%) [(Imesuré-Iréf)/Iref]×100		
<i>Tolérance AFSSAPS</i>	<i>±1%</i>	<i>±1%</i>

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

Electrons

Méthode

Bras et collimateur à 0°

4cm de PMMA en dessous de la 2DArray **DSP = 105cm**

Champ d'irradiation=20 x 20 cm², Applicateur 20x20

Centrer la 2D Array. Poser le fantôme BQ Check sur la matrice en respectant le sens Target/Gun inscrit sur le fantôme.

Mesure sur 100 UM.

L'application détecte automatiquement le BQ Check, et donne l'indice de Qualité.

Résultats

	J2/J1		
	Ionisations à la profondeur du 50% / Ionisations à la profondeur du max de dose		
	Référence (facteur 10)	Mesure	Ecart
6 MeV	0.33		
9 MeV	0.47		
12 MeV	0.60		
15 MeV	0.71		
<i>Tolérance AFSSAPS</i>			<i>±4%</i>

Valeur de référence : Valeurs prises dans l'eau facteur 10. (Sinon Multicheck est incapable de calculer)

PENSER A RETIRER L'OPTION DU BQ CHECK

c) Homogénéité et Symétrie

Photons

Matériel

Matrice PTW 2D-array

Plaques RW3 (PTW)

Application : Multicheck

Calcul des paramètres d'homogénéité et de symétrie à partir du logiciel MultiCheck :

- Ouvrir l'application Multicheck,
- Vérifier dans « Tools », « Analyse Options » que le protocole : AFSSAPS N°93, est bien sélectionné,
- Dans la fenêtre QA-Mode, renseigner les paramètres : Linac Name, Field Size, Modality, Energy
- Pour réaliser l'acquisition, cliquer sur l'icône « Start »,
- une fenêtre « Set Parameters » s'ouvre, cliquer sur OK,
- Une fenêtre « MatrixScan » s'ouvre et l'acquisition démarre,
- Si le zéro du système n'a pas été réalisé depuis 8 heures, une fenêtre s'ouvre pour le réaliser.
- Pour arrêter l'acquisition cliquer sur l'icône « Stop »,
- Dans la fenêtre « MatrixScan », cliquer sur « Accept », la fenêtre « MultiCheck » apparaît avec les caractéristiques du faisceau calculées.

Remarque : Pour faire apparaître les mesures de référence, faire défiler la liste des mesures jusqu'au nom d'acquisition avec l'extension [REF] puis revenir à l'acquisition actuelle.

Méthode

Bras et collimateur à 0°


4cm de PMMA en dessous de la 2DArray

Champ d'irradiation=20 x 20 cm²

X6 : DSP = 95cm, profondeur = 5cm (4.5cm de plaques)

X18 : DSP = 90cm, profondeur = 10cm (9.5cm de plaques)

1Gy à la chambre centrale

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

Résultats :

AFSSAPS	X 6		X 18	
		Réf (15/11/18)		Réf (15/11/18)
D max (T/P)		101.62		102.18
Homogénéité (T/P)		1.37		1.58
Symétrie (T/P)		100.63		100.88
D max (D/G)		101.66		102.12
Homogénéité (D/G)		1.30		1.57
Symétrie (D/G)		100.55		100.77
D max (T-L/G-R)		101.64		101.91
Homogénéité (T-L/G-R)		0.97		0.97
Symétrie (T-L/G-R)		100.47		100.45
D max (T-R/G-L)		101.92		102.39
Homogénéité (T-R/G-L)		1.23		1.34
Symétrie (T-R/G-L)		100.76		101.20

Tolérance : Homogénéité $\pm 1\%$

Symétrie : $0.97 < \text{Rapport Dose Couple} < 1.03$

Dmax/Daxe < 1.07

Electrons

Méthode

Bras et collimateur à 0°

4cm de PMMA en dessous de la 2DArray

Champ d'irradiation=15x15 cm² (Applicateur 15x15) Débit 400 UM/min 1Gy sur la chambre 14.14

Electrons de 6 MeV : DSP 100cm, plaque PMMA 1cm posée sur la matrice 2D array

Electrons de 9 MeV : DSP 100cm, plaque PMMA 1,5cm posée sur la matrice 2D array

Electrons de 12 MeV et 15MeV : DSP 100cm, plaque PMMA de 2cm posée sur la matrice 2D array

Résultats

	6 MeV		9 MeV		12 MeV		15MeV	
		Ref 15/11/18		Ref 15/11/18		Ref 15/11/18		Ref 15/11/18
D max (T/P)		100		100.08		100.3		100.33
Homogénéité (T/P)		0.82		0.84		0.86		0.91
Symétrie (T/P)		100.42		100.68		101.02		100.94
D max (D/G)		100.18		100.69		100.57		100.72
Homogénéité (D/G)		0.83		0.85		0.87		0.91
Symétrie (D/G)		100.84		100.45		100.48		101.01
D max (T-L/G-R)		100		100.75		100.62		101.4
Homogénéité (T-L/G-R)		0.81		0.84		0.85		0.87
Symétrie (T-L/G-R)		101.37		101.04		101.32		100.98
D max (T-R/G-L)		100.01		100.47		100.76		101.03
Homogénéité (T-R/G-L)		0.81		0.84		0.85		0.87
Symétrie (T-R/G-L)		100.5		101.34		101.26		100.39

Tolérance : Homogénéité : $E > 7\text{MeV}$ Larg isodose 90%/Larg isodose 50% > 0.85 et $D_{\text{max}}/D_{\text{axe}} < 3.5\%$

$E < 7\text{MeV}$ 2% par rapport aux valeurs de ref du CQ initial

Symétrie : $0.97 <$ Rapport doses des couples de points symétriques < 1.03 à l'intérieur de la zone définie par l'isodose 90%

d) Cohérence chaîne primaire et secondaire

Photons

Méthode

Relever le nombre d'UM de la chaîne primaire et secondaire pour une irradiation de 10, 50, 100 et 400 UM.

Débit 600 UM/min


6 MV : Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre, Novembre

18 MV : Février, Avril, Juin, Août, Octobre, Décembre

Résultats :

Energie	Lecture Chaîne I	Lecture Chaîne II	Ecart (en nombre d'UM)
10 UM			
50 UM			
100 UM			
400 UM			
600 UM			
X18 : 3000 UM			

En X18, on teste jusqu'à 3000 UM pour les ICT. Tolérance : 10%(AFSSAPS) VARIAN : 4%

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

Electrons

Méthode

Relevé le nombre d'UM de la chaîne primaire et secondaire pour une irradiation de 10, 50, 100 et 400 UM.

6MeV : janvier, mai, septembre

9MeV : février, juin, octobre

12MeV : mars, juillet, novembre

15MeV : avril, août, décembre

Résultats :

Energie	Lecture Chaîne I	Lecture Chaîne II	Ecart en nombre d'UM
10 UM			
50 UM			
100 UM			
400 UM			

Tolérance AFSSAPS : 10%

VARIAN : 4%

e) Stabilité de réponse de la chambre moniteur

La procédure est décrite dans le **MOP 3194** pour l'accélérateur TB3.


Matériel

- Chambre d'ionisation cylindrique de 0,3cc.

Relever Température : T =°C Pression : P =hPa k(T, P) =

Energie	Epaisseur de plaques à ajouter (cm)	DSP (cm)	Lecture (nC)	Lecture corrigée (nC)	Réf 18/10/2021		Ecart (%)
X6	4,5	95			10.36		
X18	4,5	95			11.56		
E6	1	100			11.07		
E9	1.5	100			11.16		
E12	2.5	100			11.31		
E15	3	100			11.49		
Energie	Epaisseur de plaques à ajouter (cm)	DSP (cm)	Lecture (nC)	Lecture corrigée (nC)	Transmission	Transmission de Réf 18/10/2021	Ecart (%)
X6 15° OUT	4,5	95				0.926	
X6 30° OUT	4,5	95				0.847	
X6 45° OUT	4,5	95				0.762	
X18 15° IN	4,5	95				0.942	
X18 30° IN	4.5	95				0.886	
X18 45° IN	4.5	95				0.817	
Energie	Epaisseur de plaques à ajouter (cm)	DSP (cm)	Lecture (nC)	Lecture corrigée (nC)	Facteur	Facteur de réf 18/10/2021	Ecart (%)
* X6 Dyn Gap 6mm	4.5	95				0.0721	
* X6 Dyn Gap 10mm	4.5	95				0.1049	

Tolérance : ±2%

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

f) Stabilité du Leaf Offset

Vérification de la stabilité du Leaf Offset avec différentes tailles de fentes glissantes.

Matériel :

Montage TOP
CI TOP Truebeam

Méthode :

En mode service, ouvrir un RT Plan.

I: //RTPlans/CQ Mensuel Leaf Offset/X6_DLG_STD120.dcm

- Transmission A
- Transmission B
- Gap 2mm
- Gap 4mm
- Gap 6mm
- Gap 10mm
- Gap 14 mm
- Gap 16 mm
- Gap 20mm

DLG = Réf = 1.156 <i>Tolérance : 0,1 mm</i>

Résultats :

Noter les résultats dans le fichier excel : [CQMensuel/Stabilité Leaf Offset/](#)

g) Stabilité de réponse des diodes (MIV)

Matériel

Semi-conducteurs : EDP-10 (6MV) et EDP-20 (18MV)
Chambre d'ionisation 0.3cc N°1544
Plaques de plexiglas RW3
Plaque avec insert pour la chambre d'ionisation

Méthode

DSP : 100 cm

Placer la chambre à la profondeur du maximum de dose :

- 1.6 cm pour 6MV (chambre insert + 1.1 cm de plaques)
- 3.5 cm pour le 18MV (chambre insert + 3 cm de plaques)

Ouvrir le fichier : [bazar physique\protocoles\CQ accélérateur\CQ Mensuel\ MIVétalonnage](#)

Se mettre sur la feuille X6 ou X18 selon l'énergie testée.

Relever T°C, Pression. Noter ces valeurs.


Température : T =°C Pression : P =hPa
k(T, P) =

Relever la lecture de la chambre sur 100 UM. Champ 10 cm x 10 cm.

Remplir le tableau (Lecture 1 L1)



Refaire la mesure (et remplir les valeurs L2 et L3).

La mesure de la dose attendue (par la diode) s'affiche alors

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

Logiciel INVIDOS (*physique/physique*)

L'utilisation du logiciel est décrite dans le **MOP 03773**.

- Créer un patient « Vérification date du jour » et ouvrir le patient
- Cliquer sur « Start » (triangle vert) 
- Une fenêtre avec un compteur s'ouvre. Lancer le faisceau de 100 UM.
- Vérifier l'écart par rapport à la mesure dans l'historique 


Energie	DSP (cm)	Lecture corrigée CI (Gy)	Lecture Diode (Gy)		Ecart (%)
X6	100		Diode 1		
X18	100		Diode 2		
			Diode 3		

Si écart > 0.7% : Calibration.

Tolérance : ±2%

NB : Si calibration des diodes, recréer un patient « vérification 6MV ou 18MV » afin de prendre en compte la nouvelle calibration pour les prochaines vérifications, puis effacer l'ancien.

Visa Physicien	Commentaires	Signature

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

IV) Système d'imagerie

Géométrie

a) Concordance des coordonnées (Imageurs versus accélérateur) pour un angle de bras

Ce test est aussi appelé « Isocal » La procédure est décrite dans le **MOP 03755**.

Rappel : Tous les mois, une calibration est nécessaire. Faire ensuite une vérification.

Les résultats de la calibration sont notés dans le tableau ci-dessous :

	Ecart max par rapport au faisceau central (cm)	Décalage max par rapport au détecteur MV (cm)	Décalage max par rapport au détecteur kV (cm)	Rotation max par rapport au détecteur MV (°)	Rotation max par rapport au détecteur kV (°)
Opérateur :					
<i>Tolérance</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

Les résultats de la vérification sont notés dans le fichier Excel « CQ Hebdo TB1-2-3 »

Lien : F:/bazar physique/protocoles/CQ Accélérateur/CQ hebdo/CQ_hebdo_TB1-2-3

b) Correspondance de l'isocentre OBI et isocentre de traitement en mode 2D

Vérifier la correspondance de l'isocentre OBI et isocentre de traitement en 2D
(Tolérance dans chacune des directions écart < 1.5mm par rapport au croisillon)

Résultats à mettre sur la feuille de CQ quotidien : **OUI NON**

c) Recalage en mode CBCT.

Recalage manuel et recalage automatique.
(Tolérance après recalage automatique, décalage mesuré < 2mm)

Résultats à mettre sur le fichier excel du CQ hebdomadaire : **OUI NON**

F:\bazar physique\protocoles\CQ accélérateur\CQ hebdo\CQ Hebdo truebeam 3

d) Recalage en mode 2D lorsque le fantôme est volontairement décalé de 1cm.

Fermer le patient et décaler la table de 1cm dans toutes les directions. Recalage manuel et automatique. (Tolérance : < 2mm)


Résultats à mettre sur le fichier excel du CQ hebdomadaire **OUI NON**

F:\bazar physique\protocoles\CQ accélérateur\CQ hebdo\CQ Hebdo truebeam 3

e) Recalage en mode CBCT lorsque le fantôme est volontairement décalé de 1cm.

Recalage manuel et automatique (Tolérance après recalage automatique, décalage mesuré < 2mm)

Résultats : écarts mesurés en manuel Vert : Lng : Lat :	Résultats : écarts mesurés en auto Vert : Lng : Lat :
OUI NON	OUI NON

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

f) Affichage distance source-détecteur imageur portal

Objectif : Vérifier le positionnement de l'imageur portal

Méthode :

Sortir l'imageur portal jusqu'à **DSP = 100 cm**. Sur l'écran, vérifiez que **MV Vrt = -6.3 cm, MV Ing = 0cm et MV lat = 0cm**

Résultats :

Valeur de MV Vrt affichée :cm

Tolérances : < 2mm

g) Justesse de l'agrandissement de l'image (OBI)

Une modification de distance source axe ou de distance source imageur entraîne un changement d'agrandissement de l'image.

Matériel : Mètre.

Méthode :

Se connecter en mode service. Sur la télécommande, sélectionner « kV ». Mettre les imageurs kV en position planifiée.

Source kV


- Vertical : Mesurer la distance entre l'isocentre de la machine et le kVS : 85,2cm. Il n'est pas possible de mesurer la distance entre la source et l'isocentre. Mesurer la distance entre le capot du kVs et l'isocentre machine
- Longitudinal et latéral : Mesurer le décalage entre la projection des lasers et la croix-repère sur le tube. (rétracter le détecteur kV)

Détecteur kV

- Vertical : Mesurer la distance entre l'isocentre de la machine et le kVD.
- Longitudinal et latéral : Mesurer le décalage entre la projection des lasers et les repères préalablement dessinés. Décaler en mode service le kVs position retractée.

Résultats :

Tests	Résultats	Analyse
Source kV		
Vertical		La distance mesurée doit être de 78 cm +/-0,1 cm.
Long & Lat		L'écart entre les repères et les lasers doit être inférieur ou égal à 1 mm.
Détecteur KV		
Vertical		La distance mesurée doit être de 75.7 cm +/-0,1 cm.
Long & Lat		L'écart entre les repères et les lasers doit être inférieur ou égal à 1 mm.

	MODE OPERATOIRE				Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3				Date : 21/04/2022
					Version : 02

h) Correspondance entre le champ programmé et le champ irradié

Objectif : Vérifier l'ouverture des diaphragmes

Matériel : plaque VARIAN graduée radio-opaque

Méthode :

- Positionner la plaque sur la table à l'isocentre. DSP 100 cm
- Ouvrir le dossier patient « zzz_qualité image »
- Sur l'écran d'imagerie, diaphragmer le faisceau à un champ de 20x20cm²
- Acquérir une image kV ANT
- Sur l'écran d'imagerie, déterminer la taille de champ irradié à l'aide des graduations sur l'image.

Tolérance : Dans les 2 directions, les écarts entre le champ irradié et le champ programmé doivent être inférieurs à 2,5mm.

Bras kV à 0°	Dimension du champ programmé (cm)				écart max (mm)	Recommandation SFPM n°29
Affichage du champ (cm ²)	Ypied	Ytête	Xdroite	Xgauche		
20 x 20						≤ 2.5mm

i) Calibration des mâchoires du kVs (Recommandations Varian)

En mode Service, Onglet PVA Calibration – Géométrie – Kv Collimateur
 Bouger les axes dans les positions demandées.
 Lancer une image kV en appuyant sur kV Beam On.
 Les acquisitions sont automatiques.
 Accepter la correction.
 Save configuration.

Test réalisé : **OUI** **NON**

j) Calibration des Dark field & Flood Field

(Procédure: F:\bazar physique\TrueBeam\Procédures\Dark Field Flood Field)

Calibration MV : **OUI** **NON**
 Calibration kV : **OUI** **NON**
 Calibration CBCT : **OUI** **NON**


Qualité mode image 2D

k) Homogénéité, rapport signal sur bruit

Objectif : Vérifier l'homogénéité en l'absence d'objet diffusant

Matériel : Aucun objet entre la source et le détecteur

Méthode : Ouvrir le patient « ZZZ_CQ_qlte_image, TB2, 040420172 »
 Programmer une image kV Ant. L'ouverture des mâchoires kV doit couvrir l'ensemble du kVD.
 Utiliser le protocole tête Ant Post (85 kV, 5 mAs).

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

Analyse :

Sur l'image : Adapter le contraste pour voir les bords de l'image.

Cliquer sur l'icône « Info Pixel » Puis sur « Histogramme ». Une fenêtre histogramme s'ouvre. Clic droit : Afficher les Statistiques

Dessiner une ROI sur l'ensemble de l'image en laissant une marge externe de 1 cm.

Vérifier les dimensions du cadre. Il est possible de les adapter en déplaçant les limites du cadre avec la souris.

X	~ 920 ± 20 pixels	~ 23.7 ± 0.5 cm
Y	~ 677 ± 20 pixels	~ 17.5 ± 0.5 cm

Analyser avec « AUCUN FILTRE »

	Valeurs mesurées	Références
Min		137093 (±588)
Max		169749 (±162)
Moyenne		157532 (±179)
Ecart type (ET)		5265 (±92)
Ecart type relatif (ETR)		3.33 (±0.05)

Tolérances : L'analyse visuelle et quantitative doit vérifier la stabilité des performances par rapport au contrôle initial.

I) Résolution à bas et haut contraste, Géométrie, distorsion, contraste

Matériel : Fantôme *TOR 18 FG* (figure 3), Plaque de cuivre

Méthode :

- Centrer le fantôme avec une rotation de 45° (repère sur le fantôme). Placer la plaque de cuivre de 1 mm sur le TOR18FG.
- DSP 100 sur la plaque de cuivre.
- Ouvrir le RDV patient « ZZZ_CQ_qlte_image, TB2, 040420172 » en mode AQ.
- Faire une image ant kV (Bras à 90°) Paramètres d'acquisition 75 kV – 2 mAs
- L'ouverture des mâchoires est de 20 cm x 20 cm.
- Analyse des résultats sur Artiscan

Résultats : joindre le CR Artiscan au CQ


Tests	Résultats recommandés
Luminosité / contraste	Erreur de +/- 0.5% sur le contraste des motifs 1 et 2 Erreur de +/- 50 sur le NGC* des motifs 1 et 2 Erreur de +/- 50 sur le NGA* des motifs 1 et 2 *NGC : niveau moyen du centre – NGA : niveau moyen de l'anneau
Distorsion	+/- 2 mm sur la valeur théorique du diamètre (150mm)
Résolution à bas contraste	Détection d'au moins 12 disques sur 18
Résolution spatiale	Le 11ème groupe de barres (1,6 pl/mm) de la mire doit être visible
Géométrie	Le cercle entourant les objets tests doit apparaître parfaitement circulaire

	MODE OPERATOIRE	Réf : ONCO-RTH-RTH/MOP-03948
	Contrôle Qualité Mensuel du TB3	Date : 21/04/2022
		Version : 02

Qualité mode image 3D

Matériel : Fantôme Catphan 504. Niveau à bulle ou niveau électronique.

Méthode :

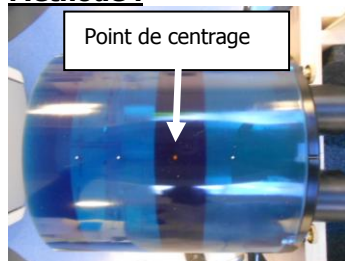

Centrer le fantôme en porte à faux au bout de la table à l'aide de la caisse en bois et du niveau électronique.

Ouvrir le patient test « ZZZ_CQ_qlte_image, TB2, 040420172 ». Ouvrir le plan "qualité d'image 3D".

Utiliser le protocole pelvis_obèse : 125kV – 1080 mAs

Analyse des résultats sur Artiscan

Analyse :

Tests	Analyse	Moyenne CBCT Pelvis	Résultats recommandés
Signal/Bruit	Mesure la variation moyenne des nb CT par rapport à la valeur moyenne	Moyenne Signal= 188,37 Moyenne Bruit= 0,63	+/-10% de la valeur de référence déterminée à l'installation 0,6%
Uniformité (UH)	Mesure la constance des nb CT de l'image d'un insert homogène	4,5	La valeur d'uniformité doit être égale à +/-40 UH
Position/Coupe (mm)	Mesure la capacité du système à réaliser une acquisition à une position précise	Valeur moyenne =0,62 +/- 0,30 Valeur théorique= 0	Erreur de positionnement fixée à +/- 2mm
Incrément de coupe (mm)	Vérifie la précision de déplacement et de positionnement de la table d'examen	Valeur moyenne = 2,02 +/- 0,18 Valeur théorique= 1,99	Erreur de +/- 1mm sur la valeur théorique (2mm)
Epaisseur de coupe (mm)	Mesure l'épaisseur de coupe reconstruite	Valeur moyenne =2,68 +/- 0,12 Valeur théorique= 1,988	Ne doit pas s'écarter de plus de 1mm de la valeur de référence (2,1mm)
Déformation et Linéarité (mm)	Mesure le degré de distorsion géométrique de l'image	Valeur moyenne =50,06+/-0,25 Valeur théorique= 50	L'écart entre la distance mesurée et valeur de référence doit être inférieure à 1mm
Résolution en Z (mm)	Apprécie la déformation suivant l'axe de déplacement de la table, lors de la reconstruction de la bille dans le fantôme	Valeur cal= 2,50 Taille bille= 0,28	+/-3,5mm par rapport à la taille de la bille (0,28mm)
Résolution spatiale (PI/cm)	Estime la capacité d'un imageur à détecter un objet et la dimension min susceptible d'être détectée	X= 7,24 Y= 6,96	Des erreurs de +/- 4PI/cm sont tolérées sur les valeurs de résolution en X et en Y
Atténuation et contraste (UH)	Détermine le niveau hounsfield moyen de chaque matériau et à tracer cette valeur en fonction du coef linéique d'atténuation pour une énergie donnée	Air= -960,21 Acrylic =118,45 LDPE =-99,99	Erreurs de +/-20 UH sur les valeurs de référence installation en UH: Air : -974 LPDE : -100 Acrylic : 115
Résolution à bas contraste	Estime les capacités d'un imageur à détecter des objets de petite taille dans des conditions particulières de faible contraste	Tous les derniers trous visibles ont des diamètres < 15 mm pour un slice de 1%	Pour un contraste de 1%, le dernier trou visible doit avoir un diamètre < à 15mm
Résolution haut contraste	Quantifie la dimension min d'un objet susceptible d'être détecté par l'imageur	5,41 PI/cm	Et ≥ à 4PI/cm pour une acquisition dont le FOV est > à 25cm

Visa Physicien	Commentaires	Signature